

dermax



Mikroprądy i fala radiowa

Technologia łączona do odmładzania skóry



CHECK-UP		
01. RESET	02. RESTORE	03. ATTACK
BOOST		

AROSHA
AESTHETIC SCIENCE

Wielofunkcyjne urządzenie stworzone z myślą o profesjonalnej kosmetologii, wykorzystujące **mikroprądy** oraz **falę radiową** do nieinwazyjnych zabiegów redukujących niedoskonałości skóry związane z procesem starzenia.



dermax | Arosha to najnowsza technologia zabiegów na twarz, która w harmonijny sposób łączy mikroprądy i fale radiowe zapewniając szybkie i widoczne efekty. Skóra staje się jędrniejsza, bardziej promienna i wyraźnie odmłodzona.


DWIE TECHNOLOGIE JEDNO URZĄDZENIE



Najważniejsze cechy

- ✓ Projektowane i produkowane we Włoszech
- ✓ Kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja
- ✓ Ekran dotykowy
- ✓ Przejrzysty i intuicyjny interfejs
- ✓ Dedykowane miejsca na głowice i aplikatory

Dwie sprawdzone technologie zintegrowane w celu wykonywania nieinwazyjnych zabiegów z widocznymi efektami już od pierwszej sesji.

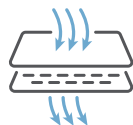

MIKROPRĄDY

Impulsy elektryczne o niskiej intensywności, które naśladują naturalne bioelektryczne sygnały organizmu. Delikatnie stymulują mięśnie twarzy, zwiększają przepuszczalność skóry oraz poprawiają jej elastyczność.



RADIOFREKWENCJA

Technologia oparta na zastosowaniu fal elektromagnetycznych o częstotliwości 420 kHz, które oddziałują z tkankami biologicznymi, wywołując efekty termiczne i biofizyczne. Proces ten stymuluje regenerację komórkową i poprawia ogólną kondycję skóry.

KORZYŚCI


Już po pierwszym zabiegu:

- Redukcja zmarszczek
- Poprawa kolorytu skóry
- Wygładzona struktura skóry
- Zmniejszenie opuchlizn i cieni pod oczami


Korzyści średnio- i długoterminowe:

- Odnowa komórkowa
- Zwiększona produkcja kolagenu i elastyny
- Wzmoczona synteza kwasu hialuronowego

MIKROPRĄDY

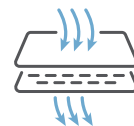

Mikroprądy to nieinwazyjna technologia opracowana w celu stymulowania odnowy skóry. Zastosowanie fal nośnych o wysokiej częstotliwości, modulacji prądu oraz regulacji intensywności pozwala dotrzeć do głębszych warstw tkanek bez naruszania powierzchni skóry. To bezpieczny, skuteczny i precyzyjnie ukierunkowany zabieg.

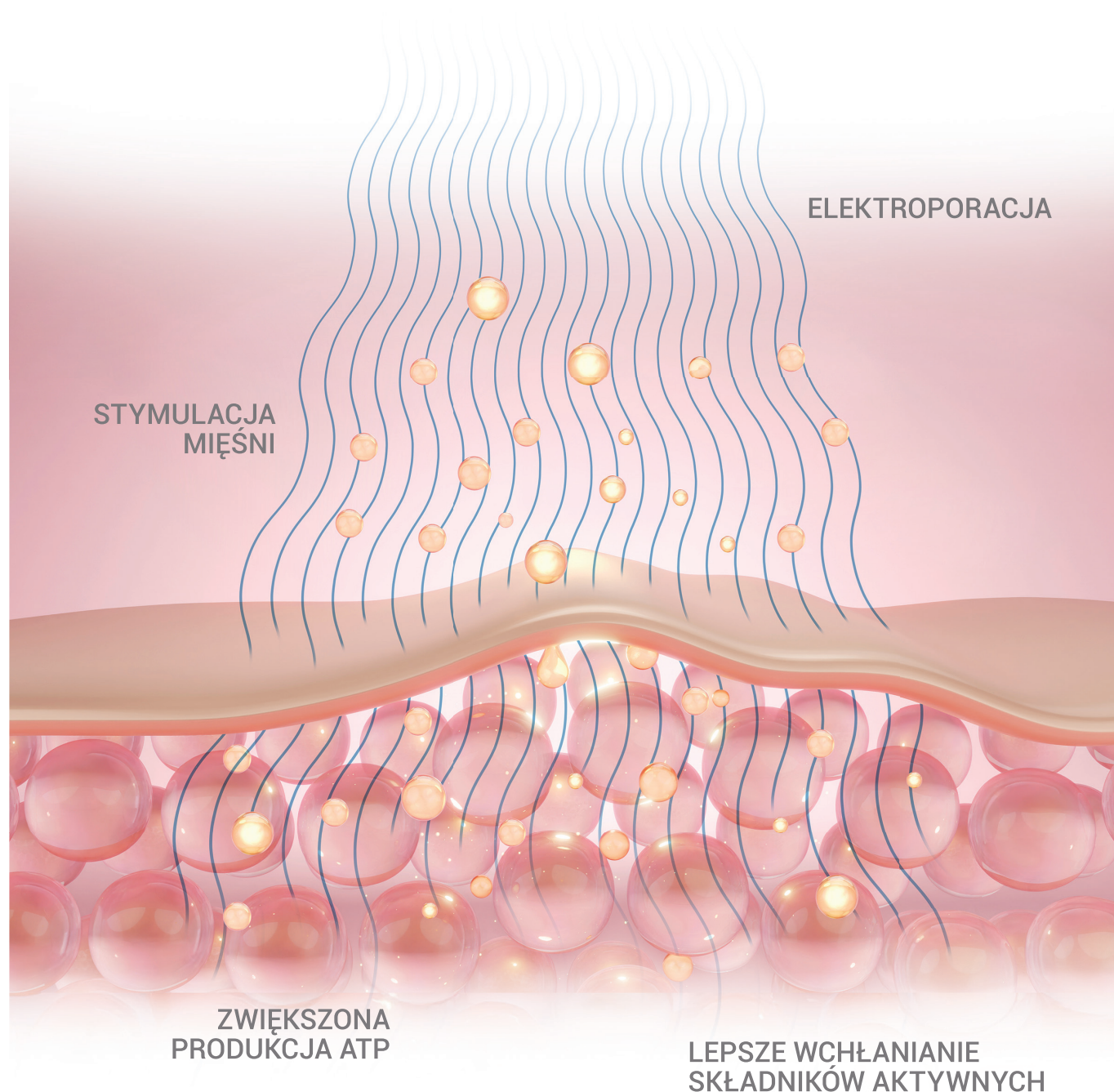



Głębokie dostarczanie składników aktywnych

Dzięki różnicy potencjałów elektrycznych składniki aktywne są wtłaczane w głębsze warstwy skóry, co zapewnia bardziej precyzyjne i skuteczne działanie w porównaniu z tradycyjną aplikacją powierzchniową.

Naturalny efekt liftingu

Oprócz zwiększania penetracji składników aktywnych kosmetyków, mikroprądy poprawiają napięcie mięśni twarzy zapewniając efekt liftingu, który ujędrnia i rewitalizuje skórę.

Zwiększona absorpcja składników

Mikroprądy wywołują efekt elektroporacji, tymczasowo otwierając mikroskopijne „kanały” w barierze skóry, co sprawia, że staje się ona bardziej podatna na wchłanianie.

Zwiększona jędrność skóry

Poprzez stymulację produkcji ATP – źródła energii komórek – mikroprądy wspomagają syntezę kolagenu i poprawiają elastyczność skóry, co skutkuje jędrniejszą i bardziej promienną cerą.

Główne zalety



✓ Monitorowanie wchłaniania

Ekran wyświetla w czasie rzeczywistym informacje zwrotne na temat skuteczności zabiegu w każdym obszarze poddawany terapii.

✓ Monitorowanie impedancji skóry

Urządzenie automatycznie reguluje intensywność fali nośnej zapewniając optymalną elektroporację i umożliwiając przepływ prądu do głębszych tkanek bez uszkodzeń i poczucia dyskomfortu.

Akcesoria

Ergonomiczna i lekka głowica
Wypożyczona we wskaźnik świetlny,
który umożliwia precyzyjną
i prawidłową aplikację.



Silikonowa płytki dopasowująca
Lekka i wygodna dla optymalnego
użytkowania.


FAŁA RADIOWA



Kontrolowane ciepło stosowane na powierzchowne warstwy skóry stymuluje korzystną reakcję biologiczną zapewniając precyzyjne, bezpieczne działanie z widocznymi i długotrwałymi efektami.

**ZWIĘKSZONA PRODUKCJA
KWÁS U HIALURONOWEGO**

**POPRAWIONE
KRĄŻENIE SKÓRY**

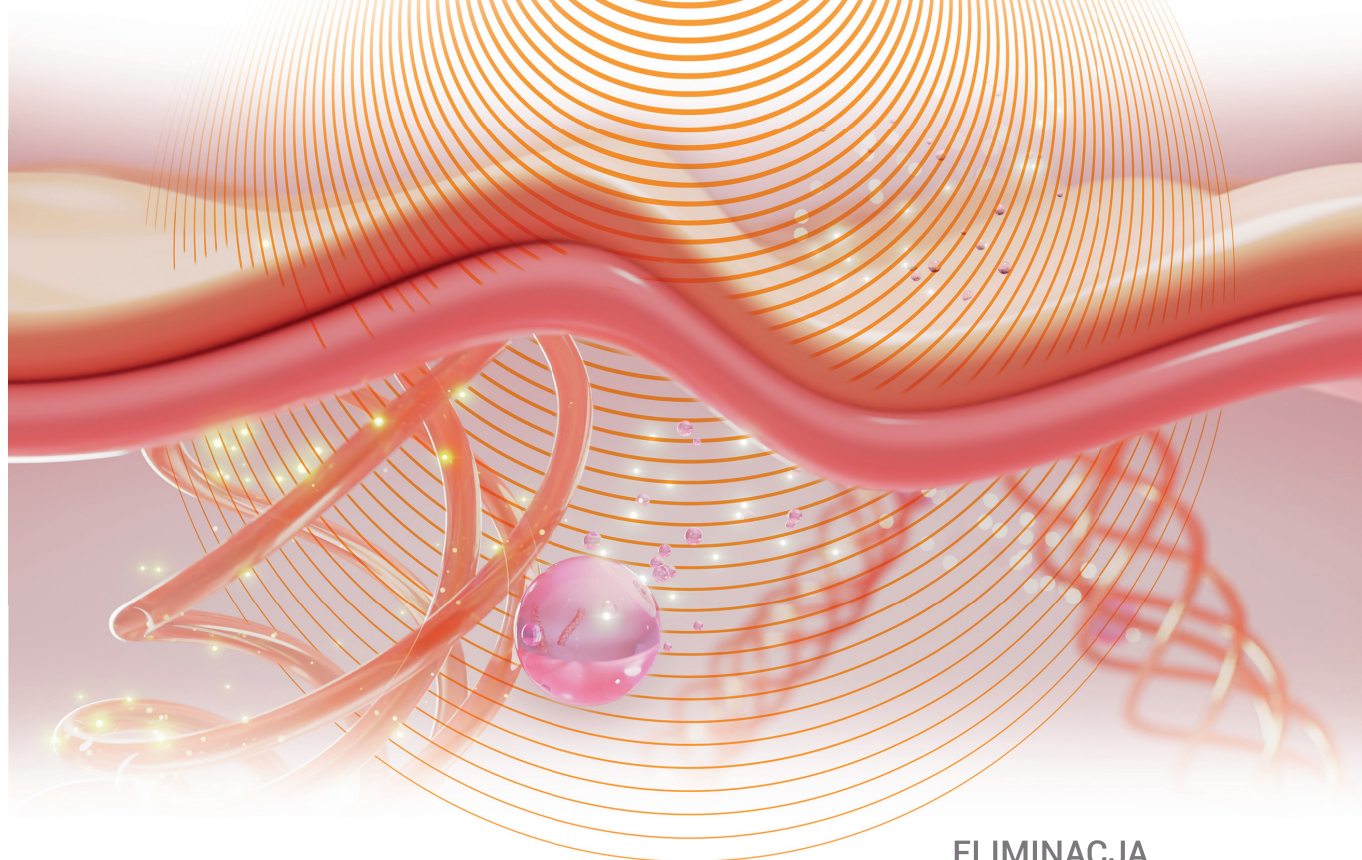

**NOWA PRODUKCJA
KOLAGENU I ELASTYNY**

**ELIMINACJA
TOKSYN**

Działanie i efekty

Efekt liftingu

Ciepło powoduje kurczenie się włókien kolagenowych zapewniając efekt liftingu już od pierwszego zabiegu.

Redukcja opuchnięć i cieni pod oczami

Fala radiowa stymuluje krążenie krwi oraz wspomaga drenaż limfatyczny w okolicach oczu pomagając zmniejszyć opuchlizny i cienie pod oczami.

Redukcja zmarszczek

Zabieg aktywuje fibroblasty, co pobudza produkcję kolagenu, elastyny oraz kwasu hialuronowego poprawiając w miarę upływu czasu jędrność i gęstość skóry.

Poprawa struktury skóry

Dzięki stymulacji produkcji kolagenu fala radiowa jest szczególnie skuteczna w leczeniu blizn potrądzikowych, zmniejsza ich widoczność i grubość, co skutkuje gładszą i bardziej jednolitą skórą.

AKCESORIA

Wymienne głowice z przetwornikami wyposażone w:

1. Powierzchnię kontaktową o zwiększonym rozmiarze.
2. Materiał ze złota o wysokiej biokompatybilności, doskonałej przewodności oraz odporności na utlenianie.
3. Zintegrowany czujnik temperatury powierzchni, umożliwiający monitorowanie skuteczności zabiegu w czasie rzeczywistym.



Głowica:

- Lekka i łatwa w obsłudze
- Zintegrowane sterowanie intensywnością dla zapewnienia nieprzerwanego przebiegu zabiegu

Zastosowanie końcówek:



FOCUS GŁOWICA BIPOLARNA

Idealna do precyzyjnego leczenia zmarszczek w konkretnych obszarach twarzy, takich jak okolice oczu i ust.



WIDE GŁOWICA BIPOLARNA

Zaprojektowana do efektywnego opracowywania większych obszarów twarzy (czoło, policzki) oraz dekoltu. Może być stosowana w połączeniu z maseczkami biocelulozowymi.



MATRIX GŁOWICA FRAKCYJNA MULTIPOLARNA

Wyposażona w 37 mikroelektrod, które skupiają wysoką energię w małych punktach. Idealna do leczenia przebarwień, drobnych blizn oraz nierówności potrądzikowych. Symuluje efekt mikronakłuwania.

ZINTEGROWANY CZUJNIK TEMPERATURY



Każda końcówka wyposażona jest we wbudowany sensor, który nieprzerwanie monitoruje temperaturę powierzchni skóry podczas całego zabiegu. Zapewnia to optymalną aktywację procesów naprawy komórkowej oraz syntezy kolagenu, jednocześnie zapobiegając uszkodzeniom tkanek.

